




eCDImport

Referti precedenti da CD/DVD disponibili in un click

eCDImport è la soluzione Exprivia che consente di **importare gli studi precedenti del paziente da qualunque postazione della struttura e da parte di qualsiasi operatore coinvolto nel workflow** senza dover prevedere hardware specifico e dedicato a questa operazione.

La soluzione Exprivia consente al medico di produrre il referto della prestazione eseguita, attraverso la comparazione con il precedente portato dal paziente, in tempi rapidi e senza dover trattenere la documentazione con il rischio che vada persa.

Non esiste limite nel disegnare soluzioni che combinino la configurazione hardware disponibile: è possibile, infatti, importare contemporaneamente dati da lettori CD/DVD e robot collegati a un numero potenzialmente illimitato di personal computer presenti nella struttura sanitaria.

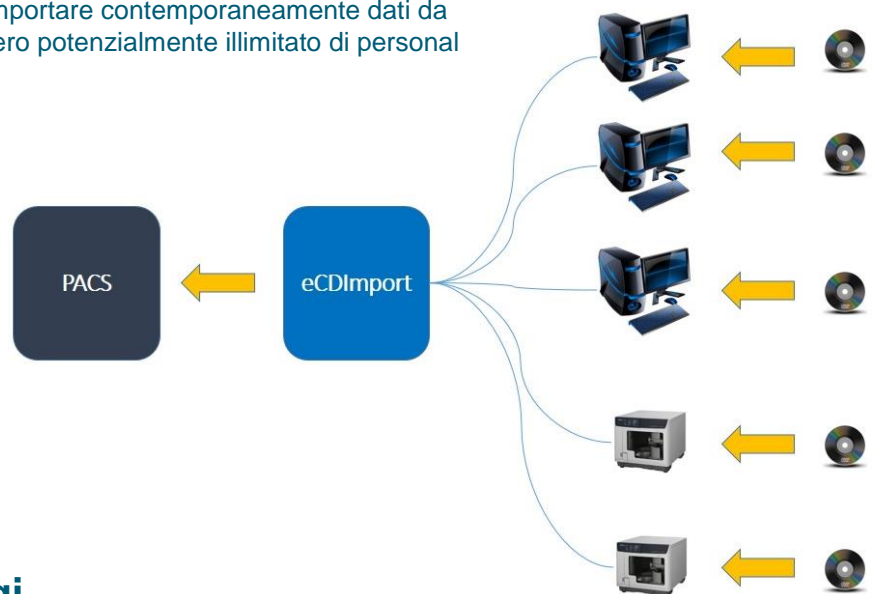

Caratteristiche e vantaggi

- **Import automatico dei precedenti:** attraverso una procedura semi-automatica, ciascun operatore (personale di accettazione, personale amministrativo, TSRM e medico) è in grado di importare i precedenti portati dal paziente (immagini DICOM e Referto Strutturato/DSR). **eCDImport** confronta i dati anagrafici presenti nel sistema PACS aziendale con quelli contenuti nel supporto e, in caso di uguaglianza, effettua la fusione delle anagrafiche importando lo studio, evitando quindi la duplicazione dei codici identificativi dei pazienti.
- **Procedure di back-office snelle:** non sarà più necessario, da parte del personale di segreteria o del medico, trattenere la documentazione precedente fornita dal paziente, evitando che la stessa vada perduta.

- **Riuso dell'hardware presente:** l'import dei dati può avvenire da tutte le postazioni presenti nel servizio di radiologia o dell'intera struttura, senza che esse debbano essere aggiornate con componenti hardware dedicati. Qualunque personal computer, dotato di lettore CD/DVD, e qualsiasi robot dotato di slot di lettura può essere utilizzato per effettuare le attività di import dati.
- **Architettura modulare:** **eCDImport** può essere installato in abbinamento a **eArchive**, la soluzione PACS di Exprivia, o a soluzioni PACS di terze parti.
- **eCDImport** è conforme al profilo **IHE IRWF**. I dati DICOM importati nel PACS locale saranno associati alla prestazione per la quale il paziente si è presentato.





Funzionalità

Gestione Import CD/DVD: vengono visualizzate le informazioni dei CD/DVD da importare, con la possibilità di scegliere le impostazioni di merge dei dati del paziente.

Gestione Import CD | Gestione Lettori CD/DVD

Selezionare la tipologia di merge del paziente a cui allegare gli studi

ROSSI MARIO

Studio/i da importare

Merge con pazienti del PACS
 Merge con Worklist
 Importa le immagini originali del CD

Indietro | Avanti

Gestione Lettori CD/DVD: è possibile visualizzare tutti i dispositivi configurati per la lettura e l'import dei CD/DVD.

Gestione Import CD | Gestione Lettori CD/DVD

Gestione dispositivi di lettura CD/DVD

Storage Manager: Filtri:

HOST: DELL- CDROM
SM: SM_DELL- CDROM
DESCRIZIONE: eCdimport2
DEVICE: CDROM
STATO: ●
SLOT: 1
LABEL: 20110303122350
JOB ID: 9
JOB STATUS: JsRunning

SM_DELL-LVARANI
 Device CDROM Slot 1

SM_DELL-GDECAGNA
 Device CDROM Slot 1

Stato	Host	Nome SM	Descrizione	Device	Slot	Label	ID Job	Stato Job	Pazienti
●	DELL- CDROM	SM_DELL- CDROM	Sm Dell- CDROM	CDROM	1				
●	DELL- CDROM	SM_DELL- CDROM	eCdimport2	CDROM	1	20110303122350	9	JsRunning	

Archivio dei CD/DVD importati: tutte le informazioni relative alle importazioni in corso e già concluse vengono conservate nel sistema. I dati possono essere filtrati per data, stato delle operazioni di import, ID o nome paziente.

Lista dei jobs per import CD

ID paziente: Nome paziente: Stati: Data iniziale: Data finale:

Data inserimen...	Nome Paziente	Data nasci...	Ses...	Nome Paziente New	Data nascita N...	Sesso New	Stato	N.I...	N.ImgOK	N.ImgKO	N.ImgToSe...	Desc Studio	Data Studio
05/02/2014 15:12:56	PROVA PROVA	05/06/1998	F	ROSSI MARIO	01/01/1901	M		2	0	0	2	RX TELERADIOGR	19/04/2012
05/02/2014 09:41:00	ROSSI MARIO	01/01/1901	M	ROSSI MARIO	01/01/1901	M		2323	0	0	2323	TC ADDOME COM	01/01/2012
03/02/2014 16:15:07	PROVA PROVA	10/10/1985	F	PROVA PROVA	10/10/1985	F		1	1	0	0	RX TORACE AL LE	09/11/2009
03/02/2014 15:47:07	PROVA PROVA	31/01/1984	F	DI SILVIO^MAURO	11/11/1976	M		1	1	0	0	RX ORTOPANTOM	19/04/2012
03/02/2014 12:56:42	PROVA PROVA		M	PROVA PROVA		M		910	0	1	909		18/10/2013

La suite e4cure MedStation CE 0476 – eArchive – eRis - eVisit è un Dispositivo Medico certificato (93/42/CEE) di classe IIA.
 La lista completa delle versioni dei modelli certificati è disponibile contattando Exprivia.